



MYTREX


MIRAY NIR

Фото-омоложение
последнего поколения и
уход за кожей



Самая эффективная процедура омоложения лица


Простой в управлении аппарат для фото-омоложения
в домашних условиях с салонным результатом

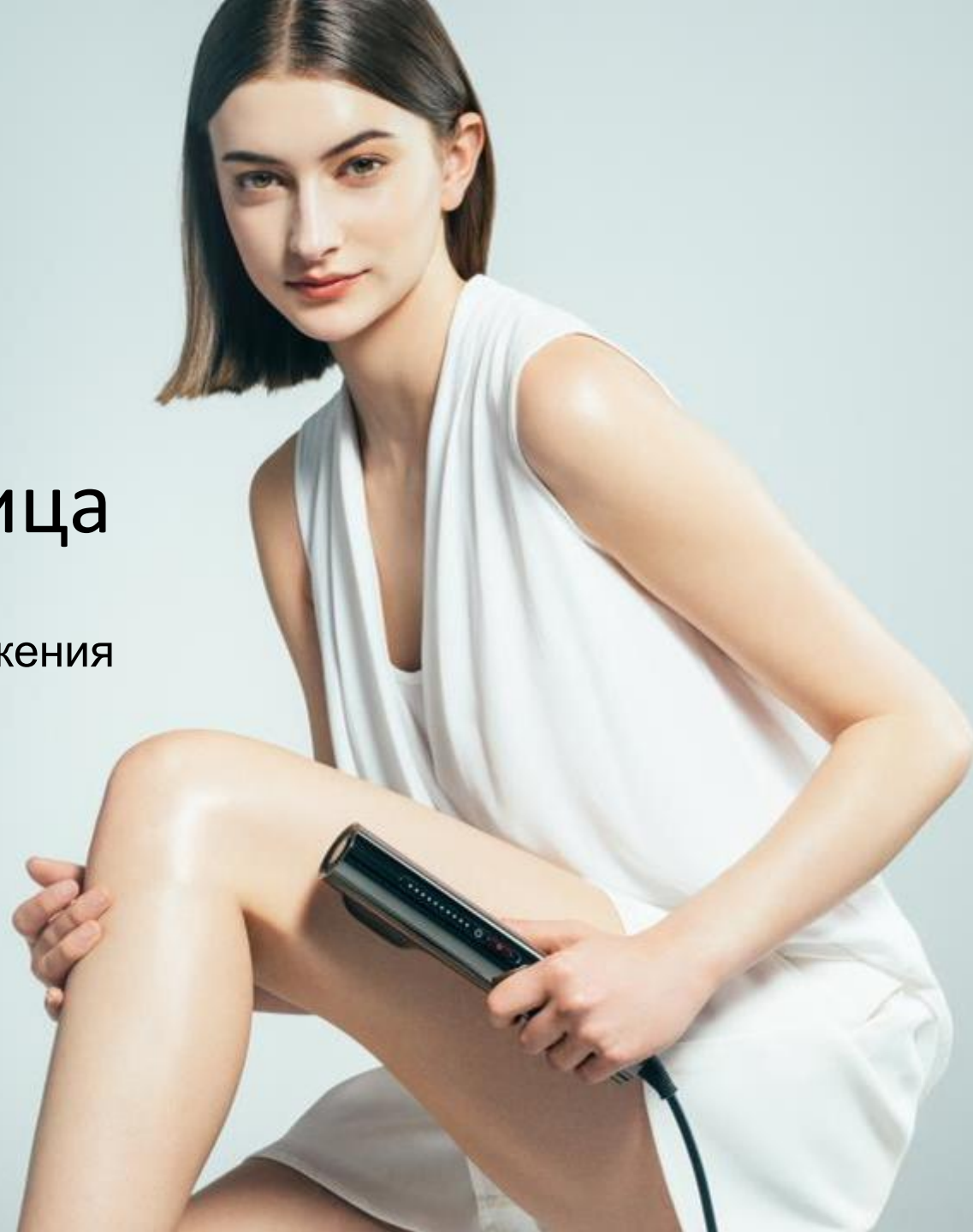

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА ПО ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

NIR - инфракрасный термолифтинг

Современная методика мгновенной подтяжки кожи
лица и тела без боли и повреждений

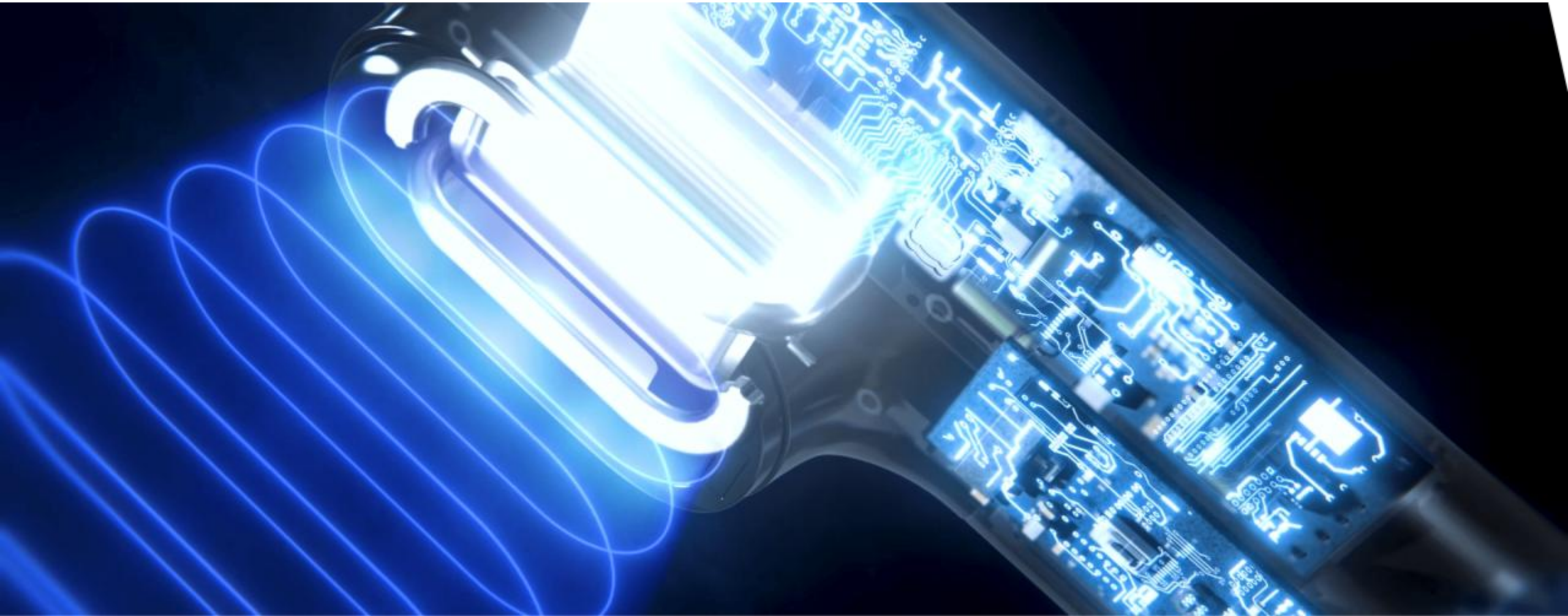

ВСЕГО ЛИШЬ ОДИН

MiRAY NIR MYTREX

для полного восстановления вашей кожи

Безоперационная
подтяжка

Уменьшение
морщин

Яркий,
ровный тон

Сужение
пор

Осветление
пигментации

Здоровое
сияние





3 ГОДА РАЗРАБОТКИ ВЕДУЩИМИ ИНЖЕНЕРАМИ MYTREX

Лучшие японские бьюти инновации для того, чтобы вы могли использовать технологию NIR для фото-омоложения лица и тела у себя дома.

ЛУЧШЕ САЛОННОГО ФОТО-ОМОЛОЖЕНИЯ

ОБЫЧНОЕ ФОТООМОЛОЖЕНИЕ IPL

Широкие импульсы с разной длиной лучей от 400 до 1400 нм
= основная часть энергии распределяется в верхних слоях кожи
= слабое воздействие на дерму


NIR - ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОЛИФТИНГ

Концентрированные лучи ближнего ИК диапазона от 900 до 1300 нм
= направленное воздействие на коллаген, эластин и фибробласты
= выраженный эффект лифтинга и сокращения морщин

Инновационная технология NIR в Аппарате для фото-омоложения **MiRAY** отсекает короткие лучи светового диапазона. Вся энергия проходит в **глубокие слои кожи**, не повреждая ее поверхность.

Дерма - слой кожи, отвечающий за ее упругость

В дерме вырабатывается эластин, коллаген и гиалуроновая кислота. Они делают кожу упругой и эластичной, наполняя ее красотой и сиянием

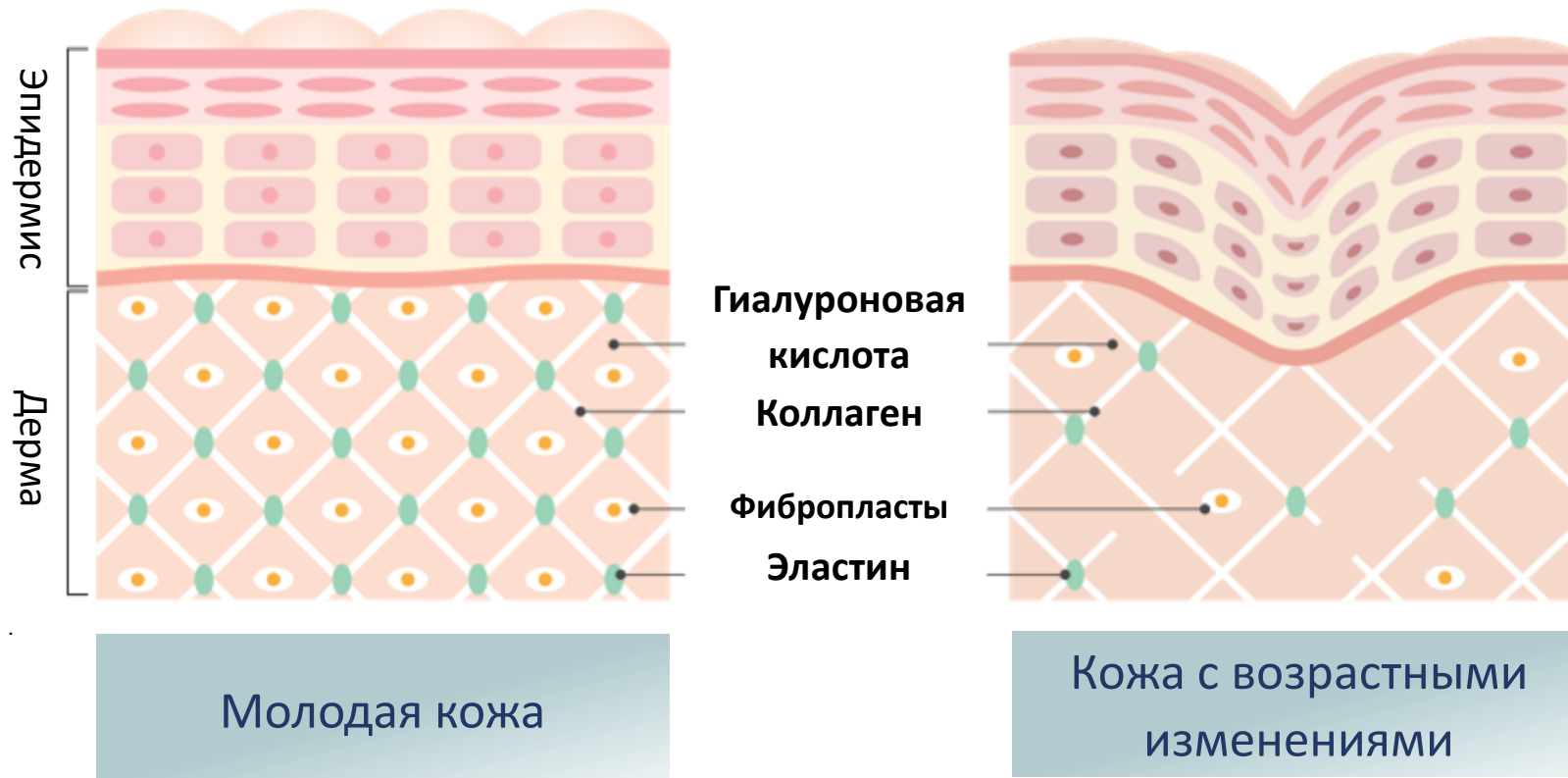

NIR БЛИЖНИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ

Фибробласты – основные клетки дермы, которые вырабатывают собственные коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и другие важные для молодости кожи компоненты.

Мощный, направленный прогрев NIR лучами усиливает активность фибробластов. Они начинают быстрее делиться и продуцировать больше активных веществ.

Запускается процесс восстановления клеток и выработки коллагена. Толщина, плотность и упругость кожи увеличиваются, выраженность морщин снижается, поры сужаются. Кожа становится более увлажненной, выравнивается ее тон.

Улучшается работа сосудов, микроциркуляция, цвет лица становится ярким и сияющим, более ровным и светлым.


РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ MIRAY MYTREX

после 4-х недель тестирования аппарата


Через 28 дней у всех участников тестирования MiRAY MYTREX наблюдались изменения плотности и упругости дермы.


Отмечен рост показателей в среднем на

45.7% ↑

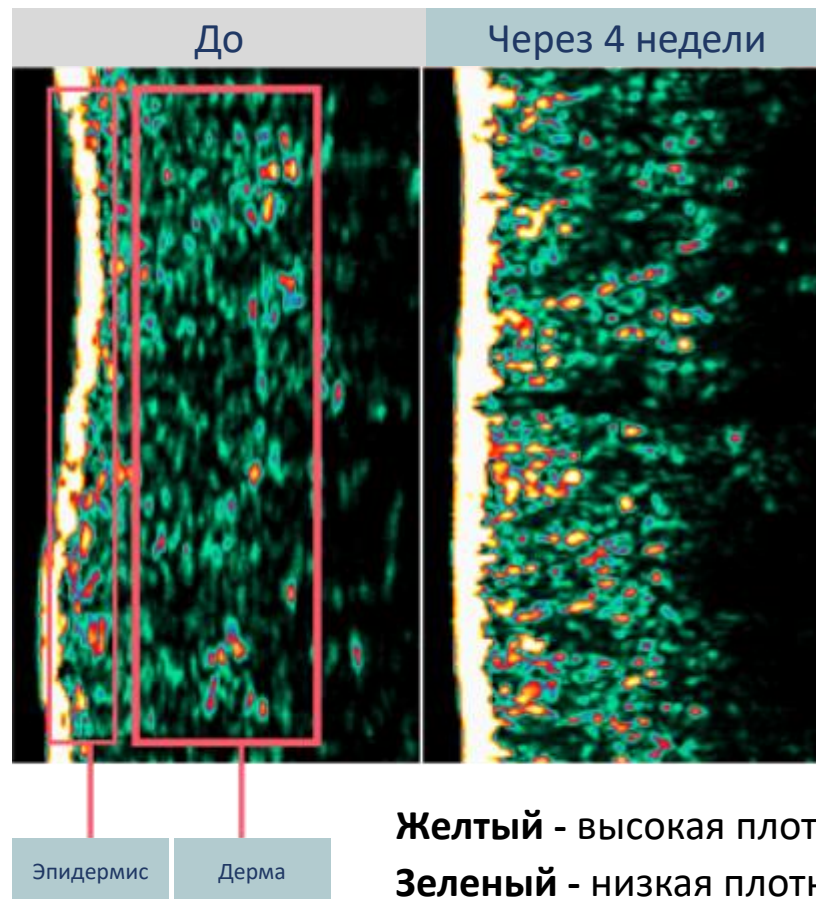


Желтый - высокая плотность коллагена
Зеленый - низкая плотность коллагена

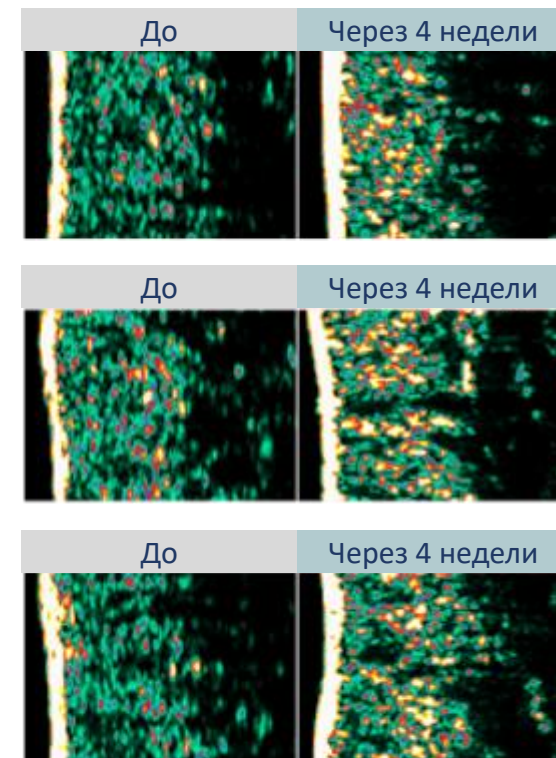


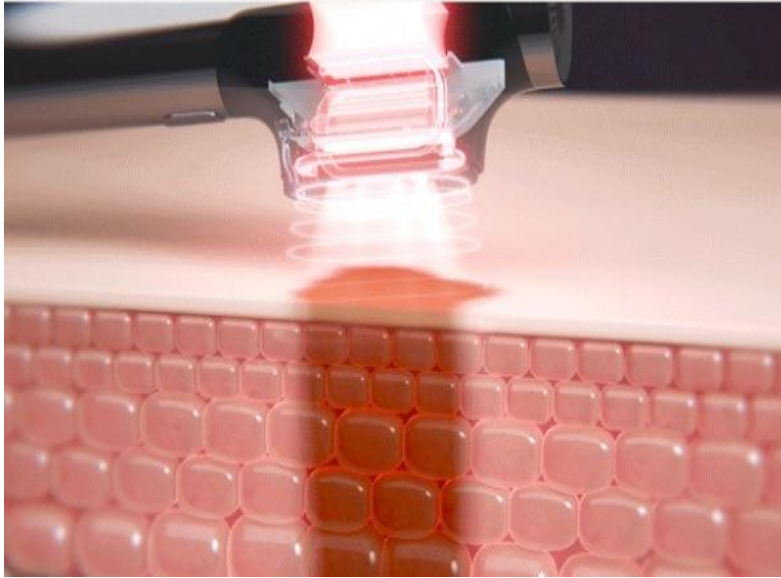


Сконцентрированное излучение разных длин волн, специально предназначенных для улучшения кожи. Излучение DPL с длиной волны 500-650 обладает высоким коэффициентом поглощения меланином и гемоглобином. Считается, что это оптимальный диапазон волн для улучшения состояния кожи. Высокая плотность излучения DPL позволяет эффективно воздействовать на проблемы с тусклостью кожи и покраснения лица.

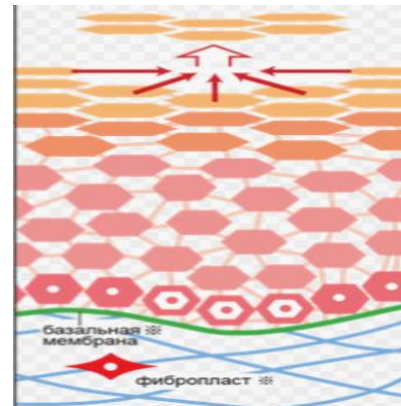

Ороговевшие частицы «старого» эпидермиса

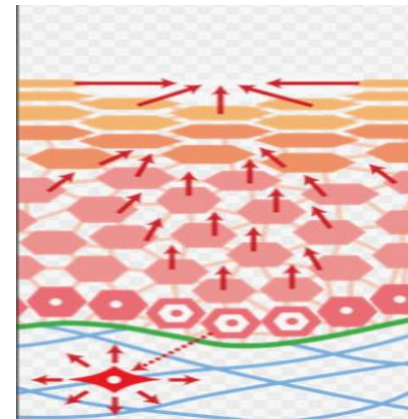

Ороговевшие частицы менее плотные, легче удаляются

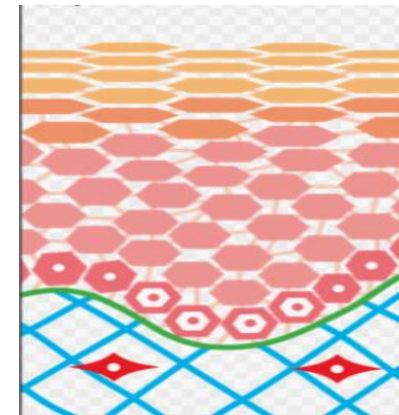

Кожа яркая, гладкая, красивая

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ MIRAY MYTREX

после 4-х недель тестирования аппарата

Гладкость кожи

+12.5% ↑

Сухость кожи

-52.6% ↓

Сияние кожи

+14.4% ↑

Возрастные изменения

-16.5% ↓

Эластичность кожи

+11.1% ↑

Шероховатость кожи

-9.1% ↓

*по результатам исследования сертифицированной
компанией SGS (22 человека, 28 дней)





Динамика изменения гиперпигментации

- Площадь пигментных пятен и их число снизилось

- Тон цвета пигментных пятен стал светлее

Меланин в клетках мгновенно поглощает энергию инфракрасного света NIR. От этого воздействия он быстро разрушается и распадается. Часть меланина метаболизируется и выводится из организма, а оставшаяся часть перемещается в роговой слой кожи и отшелушивается естественным образом.

Динамика осветления тона кожи

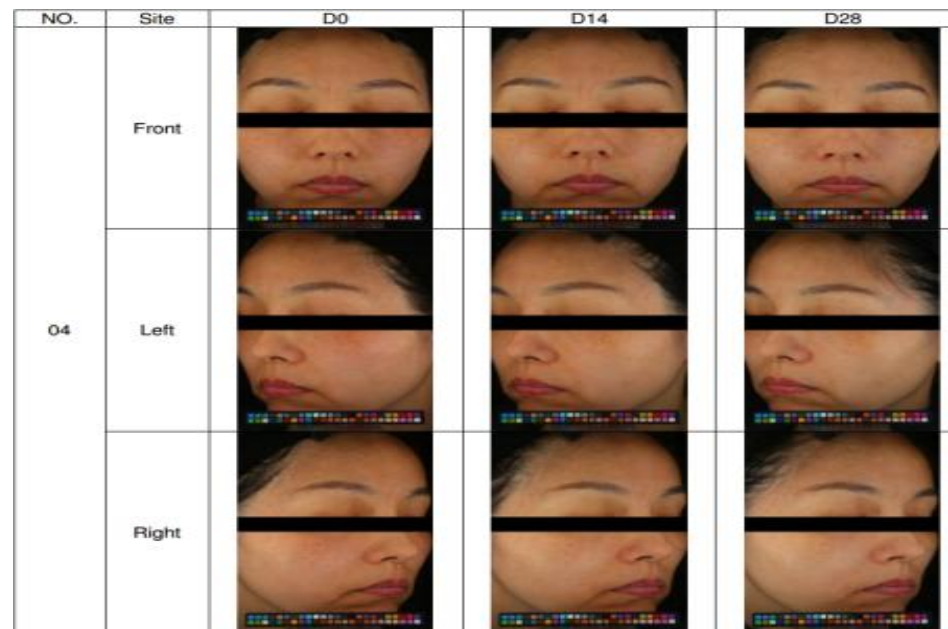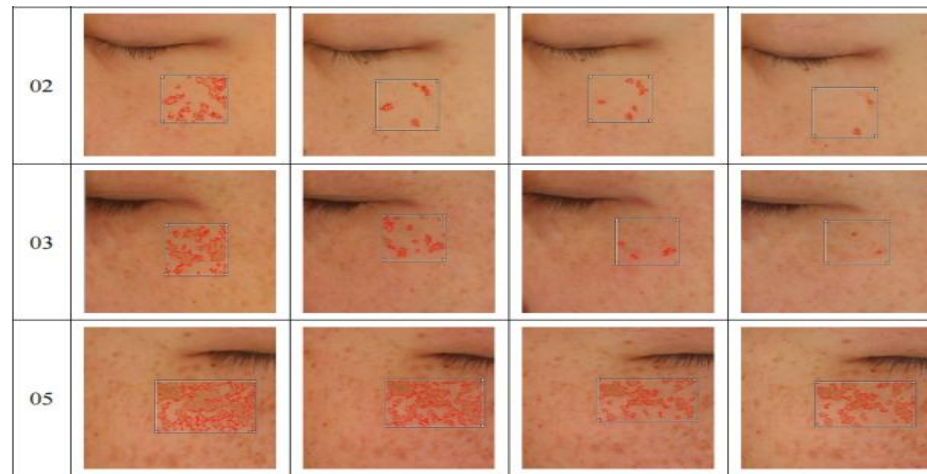

Результаты за 4 недели применения MiRAY MYTREX



До применения

Через 4 недели



До применения

Через 4 недели



До применения

Через 4 недели

Я вижу результат и готова продолжать использовать MiRAY MYTREX

КОЖА БОЛЕЕ УПРУГАЯ И ЭЛАСТИЧНАЯ

УМЕНЬШИЛИСЬ МОРЩИНЫ

СУЗИЛИСЬ ПОРЫ

ТОН БОЛЕЕ РОВНЫЙ И СВЕТЛЫЙ

Комфортный прогрев, без боли

Передвигайте свой MiRAY MYTREX в соответствии с указанными линиями



Работайте по чистой, сухой коже

Проходите по каждой линии дважды

Не совмещайте с эпиляцией, а также с другими повреждающими кожу процедурами



Обязательно надевайте защитные очки во время использования аппарата. Избегайте попадания вспышек в глаза. Прибор не предназначен для коррекции кожи вокруг глаз.



ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА

Плотно приложите окно прибора к коже и двигайтесь непрерывно, не оставляя пробелов, по указанным на рисунке линиям. Делайте по 2 вспышки на каждом участке. Обработайте сначала одну сторону лица, затем другую.



ОМОЛОЖЕНИЕ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

Для шеи расположите окно прибора горизонтально и перемещайте его сверху вниз. Для области декольте поставьте окно вертикально и перемещайте его от центра груди к краю тела, не заходя на молочные железы.

Рекомендованный курс: 10 процедур раз в 2-3 дня, повторять через полгода.

Поддерживающие процедуры: 1 раз в месяц.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОЖУ

Выберите один из трех уровней мощности воздействия, используя кнопку питания



Режим для чувствительной кожи

Цвет индикатора синий, низкий уровень мощности

Стандартный режим

Цвет индикатора красный, средний уровень мощности



Режим высокой мощности

Цвет индикатора оранжевый, высокий уровень мощности





MYTREX

MiRAY

www.mytrex.ru